

ALISEO[®]
ITALY

**PROFESSIONAL
TECHNOLOGY SOLUTION**

—

LIGHT VERSION

LASER A DIODO EPIL X20B

Epil X20B è un laser a diodo di ultima generazione, utilizzabile in estetica per trattamenti di epilazione, trattamento cutaneo delle iper pigmentazioni melaniniche superficiali e trattamenti di podologia professionale. Funziona sprigionando energia luminosa che viene emessa dal diodo laser 808nm, catturata dalla melanina e trasformata in calore agendo in **modo selettivo** sul bulbo pilifero. Lavora per **trattare ampie superfici in breve tempo**, così da poter epilare grandi zone in pochi minuti, garantendo la massima sicurezza sulla pelle. Può essere utilizzato su tutto il corpo (esclusa zona oculare e mucose) e su **tutti i fototipi da I a VI e su ogni colore di pelo** (escluso il pelo bianco).

1200 WATT DI POTENZA DEL MANIPOLO

ANCHE SU PELI CHIARI E SOTTILI

LUNGHEZZA D'ONDA: 808nm

10 MILIONI DI SPOT REALI

MANIPOLO DOTATO DI LED AD ALTA POTENZA
Lunga durata. Alta stabilità.



1

TRATTAMENTO EPILAZIONE

Funziona sprigionando energia per **trattare ampie superfici in breve tempo**, così da poter epilare grandi zone in pochi minuti, garantendo la massima **sicurezza** sulla pelle. Può essere utilizzato su tutto il corpo (esclusa zona oculare e mucose) e su **tutti i fototipi da I a VI e su ogni colore di pelo** (escluso il pelo bianco).



2

TRATTAMENTO CUTANEO

Epilx20B è dotato di un software che permette di trattare anche **le iper pigmentazioni melaniniche superficiali** ossia un tipico caso di accumulo di melanina. È in grado di trattare qualsiasi tonalità, agendo con lo stesso principio per il quale agisce contro i peli superflui.



3

TRATTAMENTO PODOLOGIA

È possibile utilizzare EpilX20B per favorire la ricrescita delle unghie in tempi rapidi e indolore.

S C H E R M O T O U C H S C R E E N

Display touch screen a colori di **facile utilizzo** con parametri di lavoro per ogni fototipo preimpostati, variabili in base alle esigenze. **Memorizzazione parametri** di ogni seduta.

Interattivo. Dinamico. Facile.

S I S T E M A D I R A F F R E D D A M E N T O

Lavorare in estate con Epilx20B non sarà un problema. Grazie al **doppio raffreddamento dell'acqua** progettato e prodotto nei nostri laboratori, la temperatura sarà costantemente controllata. Inoltre è dotato di un controllo del sistema di raffreddamento della punta del manipolo e potrà essere **gestito autonomamente** in base alle necessità per un immediato sollievo della pelle.

Piacere. Comodità. Velocità.



L A S E R A L A R M

Sistema wireless per utilizzo laser a diodo in cabina. Come funziona: la centralina posta all'esterno della cabina, tramite segnale luminoso, indica l'uso in corso dell'apparecchiatura mentre la centralina secondaria bloccherà momentaneamente l'uso dell'apparecchiatura al momento dell'apertura della porta.

In conformità alla Normativa CEI EN 60825-1





SCHEDA TECNICA

Potenza	40 j/cm ²
Frequenza	1/10 Hz
Raffreddamento acqua	Aria + Tec
Impulso	300 ms
Lunghezza d'onda	808nm
Potenza manipolo	1200 watt
Touch screen	10" Full HD Android WI-FI
Dimensioni	35x35x39 cm
Peso	15 kg
Certificazione	Marcatura CE

THERMOLASER WONDER SNELL

● ● ● FINO A 5 CM IN UNA SOLA SEDUTA ● ● ●

Wonder Snell utilizza un'energia a bassa intensità che permette di stimolare le membrane delle cellule adipose senza lesionarle riducendo la loro grandezza.

I trigliceridi vengono scissi in acidi grassi e glicerolo ed espulsi dall'adipocità determinando il collasso e la fuori uscita del grasso dalla membrana cellulare **in modo del tutto naturale**.

Durante la seduta i pori della membrana cellulare adiposa rimangono aperti fino a 72 ore permettendo così la mobilitazione del grasso quindi, è consigliabile di distanziare le sedute di almeno 72 ore.

A COSA SERVE?

- Snellimento localizzato nei punti critici resistenti a diete alimentari e fitness
- Riduzione della cellulite
- Sblocco del sistema linfatico
- Stimolazione delle funzioni metaboliche dell'organismo

DOVE AGISCE?

E' possibile trattare più zone contemporaneamente allo stesso tempo.

Wonder Snell può essere utilizzato nel trattamento delle adiposità localizzate e cellulite nelle zone come:

- Braccia
- Addome
- Glutei
- Fianchi
- Ginocchia

SEDUTE

I primi risultati sono visibili già dalla prima seduta mentre per rimodellare la silhouette è sufficiente un trattamento di 30/50 minuti con cadenza bi-settimanale per un ciclo di 10/12 sedute.

Dopo qualche settimana l'area trattata apparirà **tonica, compatta e levigata**.

La seduta è completamente indolore con una piacevole sensazione di calore sulla pelle ed a differenza di altre tecniche **non è invasiva**.



SCHEDA TECNICA

Lunghezza d'onda	LED VISIBLE + laser 780nm, 880nm, 940nm e 980nm
Fluenza di energia	10mw
Tipo di fonte	Laser a bassa intensità
Sorgente laser placche	Produttore - Bp Italia S.r.l
Quantità diodi	n.120
Tipo laser	Emissione continua/pulsata
Raffreddamento	Aria
Touch screen	10'' android WI-FI
Potenza	220V - 50/60 hz
Peso	20 kg / 15 kg
Dimensioni	30x36x26 cm
Accessori di serie	Telecomando di arresto
Certificazione	CE - Medical Device

RADIOFREQUENZA SUPER TONE

Da sempre, con le tecnologie **Aliseo Italy®** la metodica di lavoro è **semplice ed intuitiva**, rendendo il trattamento in cabina **confortevole** e di **rapida esecuzione**.

Nata dalla ricerca avanzata nei nostri laboratori, la piattaforma Rf Super Tone si differenzia dai tradizionali macchinari a radiofrequenza per la possibilità di effettuare **10 trattamenti combinati ottimizzando così i risultati**.

Super Tone è indicata per agire sugli inestetismi viso/corpo in modo completo e personalizzato con **grande versatilità**, ripristinando il metabolismo interno.

RADIOFREQUENZA MONOPOLARE VISO E CORPO

La radiofrequenza monopolare penetra nella pelle fino a 20mm raggiungendo derma e grasso sottocutaneo, stimolando così le molecole d'acqua a muoversi rapidamente producendo calore endogeno compreso tra 45 e 55° C.

Risultati: rughe liftate, pelle rassodata, corpo rimodellato e riduzione dell'adipe e della cellulite.

RADIOFREQUENZA BIPOLARE VISO

La radiofrequenza bipolare penetra nella pelle dai 2 ai 4mm ed è quindi indicata per trattamenti facciali.

Risultati: tonificazione cutanea, rigenerazione delle fibre di elastina e collagene, attenuazione delle rughe e ringiovanimento facciale.

ULTRASUONI

L'efficacia degli Ultrasuoni è dovuta a quattro differenti effetti in grado di agire in sinergia:

- Effetto termico dovuto all'assorbimento dell'energia da parte dei tessuti.
- Effetto meccanico consiste in un micromassaggio cellulare e intracellulare ad alta intensità determinato dal movimento delle particelle dei tessuti attraversati dall'onda ultrasonica.
- Effetto chimico consiste in una modifica del pH locale e della permeabilità cellulare.
- Effetto analgesico e antinfiammatorio attraverso la decontrazione dei muscoli

Grazie agli Ultrasuoni si ha la possibilità di avere una perdita armonica del peso, riduzione della cellulite, vascolarizzazione sanguigna e tonificazione dei tessuti.



SCHEDA TECNICA

Classe	1 tipo BF
Alimentazione	220/230V
Rf bipolare	18watt - 1 Hz
Rf monopolare	50watt - 500 Khz
Corrente assorbita	1,5 A
Potenza assorbita	300watt
Touch screen	10'' android WI-FI
Dimensioni elettrodi	15-30-40-60-70-80nm
Dimensioni	36x30x26 cm
Peso	5kg
Certificazione	CE

RADIOFREQUENZA PERFECT SHAPE

Perfect Shape unisce 3 tecnologie all'avanguardia ed è in grado di contrastare anche gli inestetismi più impegnativi per avere un corpo sempre **tonico ed in forma senza fatica**.

I risultati sono visibili immediatamente attraverso una **notevole diminuzione delle circonferenze**.

RADIOFREQUENZA

Scalda il tessuto adiposo in modo selettivo. È una vera sferzata di ritmo al nostro corpo e all'ecosistema della pelle, dalla superficie alle zone più profonde, riattivando i meccanismi riparativi e antinfiammatori corporei.

VACUUM PULSATO

Amplifica l'effetto della radiofrequenza agendo meccanicamente sui trigliceridi aumentando la loro fluidità. Inoltre aumenta la microcircolazione e potenzia la penetrazione del Laser LLLT negli adipociti.

LASER LLLT

Stimola la funzione delle vie linfatiche che porta al rilascio di acidi grassi e glicerolo con la conseguente riduzione delle cellule adipose.

VISO

Il manipolo viso 3D riattiva la matrice dermica, drena e tonifica efficacemente stimolando naturalmente la produzione e la rigenerazione del collagene e dell'elastina.

A P P L I C A Z I O N I :

- Disidratazione
- Pelle sfittica
- Rughe
- Senescenza tissutale
- Acne nodulo cistica
- Contorno occhi e labbra

CORPO

Il manipolo corpo 3D è in grado di "succhiare" 16mm di tessuto nella cavità del vacuum, permettendo così il riscaldamento ad una profondità cutanea maggiore, fino a 25mm. Nell'arco di circa 10/15 sedute è possibile ridurre dai 2,5 cm ai 5,5 cm.

A P P L I C A Z I O N I :

- Ginnastica vascolare
- Drenaggio linfatico
- Cellulite edematosa
- Cellulite fibrosa
- Adiposità
- Antonia tissutale
- Scarsa circolazione sanguigna
- Smagliature



SCHEDA TECNICA

Classe	1 tipo BF
Alimentazione	220/230V
Vacuum	100 kpa
Radiofrequenza	20watt - 400/500 Khz
Corrente assorbita	800 watt
Laser LLLT	10 mwat 930nm
Touch screen	10'' android WI-FI
Temperatura ambiente	10°C max 40°C
Umidità ambiente	max 95%
Dimensioni	36x30x26
Certificazione	CE

ELETTORPORATORE GOLDEN DERM

Golden derm è stata pensata per ottenere il massimo risultato utilizzando una gamma di sieri professionali ad altissima percentuale di principi attivi con **assorbimento del 100%**. trattasi di una tecnologia che utilizza la somministrazione di lievi impulsi elettromagnetici con lo scopo di aumentare la capacità di assorbimento della pelle. è stato sviluppato un **manipolo innovativo completamente indolore** nello stesso tempo **ultra performante** che permette la veicolazione dei sieri in profondità.

MANIPOLO

Utilizza un nuovo manipolo appositamente studiato per veicolare con il miglior comfort di trattamento le molecole fondamentali per la cute quali Acido ialuronico, Amminoacidi e Vitamine. Inoltre è stato creato il percorso cosmetico Golden Derm viso/corpo con risultato visivo immediato, senza fastidio, senza aghi e senza bisturi.

COSMETICA VISO

ANTI AGE - 3 TRATTAMENTI

3 siero 30ml
3 maschera alginato
1 attivatore maschera 125ml

BIORIVITALIZZANTE - 3 TRATTAMENTI

3 siero 30ml
3 maschera alginato
1 attivatore maschera 125ml

COSMETICA CORPO

CELLULITE - 5 TRATTAMENTI

5 siero 30ml
1 crema corpo 250ml

RIDUCENTE - 5 TRATTAMENTI

5 siero 30ml
1 crema corpo 250ml



SCHEDA TECNICA

Alimentazione	220 vac 50/60HZ
Assorbimento	150 VA
Tipo apparecchio	BF
Classe isolamento	I
Fusibili	2xT4A 250V
Frequenza	800/1200Hz
Corrente	20mA
Manipolo viso/corpo	Modello roll on n.2
Touch screen	10" android WI-FI
Optional	Carrello
Peso	10kg
Dimensioni	36x30x26 cm
Certificazione	CE

PRESSOTERAPIA DIGITAL PRESS

Digital press è un'innovativa apparecchiatura per il pressomassaggio utile nei casi di ritenzione idrica ed edemi. Eseguendo una pressione esterna esercitata attraverso l'applicazione di appositi gambali e braccioli suddivisi in 10 settori che possono lavorare simultaneamente o indipendentemente. Grazie a questa simulazione di massaggio manuale, l'organismo sarà in grado di espellere con maggiore facilità le tossine e le scorie presenti nell'organismo.

ADATTO A QUALSIASI CORPORATURA

TUTA REALIZZATA DA ARTIGIANI ITALIANI

LAVORO AUTONOMO

SGONFIAGGIO SETTORI AUTOMATIZZATO

SILENZIOSA DURANTE IL LAVORO

COME AGISCE

La pressoterapia agisce sulla circolazione venosa e linfatica migliorando il microcircolo ed eliminando i liquidi in eccesso.

Di conseguenza migliora gli inestetismi e le problematiche che derivano dal ristagno dei liquidi.

FUNZIONI

LINFODRENAGGIO
DRENANTE DELLA CIRCOLAZIONE VENOSA
AZIONE CONTRO L'INestetISMO DELLA CELLULITE
POST MASTECTOMIA

Trattamento arti inferiori, addome e arti superiori


RISULTATI

Il pressomassaggio permette di tonificare i tessuti del corpo in modo da favorire la circolazione e l'eliminazione dei liquidi in eccesso quindi favorirà la perdita di peso e molteplici effetti positivi e benefici per il corpo, un vero trattamento detossinante e rigenerante.



SCHEDA TECNICA

Classe	1B
Alimentazione	AC 220 - 240 V; 50Hz
Potenza	<300VA
Corrente assorbita	1,4A
Max pressione uscita	250mmhg
Range di pres. settore	30/90 mmhg
Settori	8
Programmi	15
Touch screen	10'' android WI-FI
Dimensioni	50x50x115 cm
Condizioni esercizio	15°C < T < 35°C max 60°C
Condizioni conservazione e trasporto	-10°C < T < 70°C max 80% CE

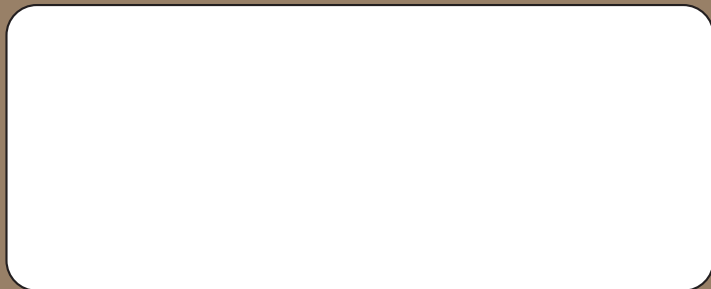

BP ITALIA S.R.L • P.I 01497950558

*Sede legale e produzione: Vocabolo Isola, 43 05031 Arrone (TR)
Tel assistenza: +39 0744 389108 Tel servizio clienti: +39 0744 171171
info@aliseoitaly.com - www.aliseoitaly.com*